

▶▶8020口腔ケアセット 個別商品詳細情報 1

デンタルピック

(三角ようじ) 100本 携帯ケース付





新習慣として活用したい
歯周病予防のためのようじです

三角形の二辺で歯垢除去、底辺で歯ぐきのマッサージ効果！

歯と歯の間の形状に合わせて開発された歯間清掃用具で、断面が二等辺三角形になっており、上の二辺で歯の汚れを除去、底辺で歯茎をマッサージします。このマッサージが歯肉の組織を活性化させ、歯周病菌などに対し抵抗力を強めます。

製品の特徴

- 従来のつまようじ(丸ようじ)に対し、デンタルピックは歯科医が勧める口腔ケア用品。プラーク除去だけでなく、歯ぐきへの良い刺激で歯ぐき引き締め効果が期待できます。
- 便利な携帯用ケース付き。使い捨てですから、外出時の口腔ケアやエチケット用に適しています。

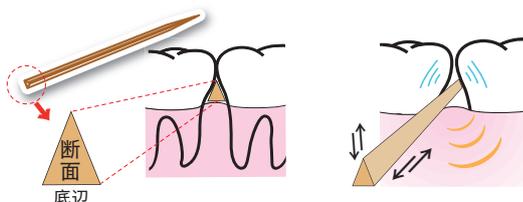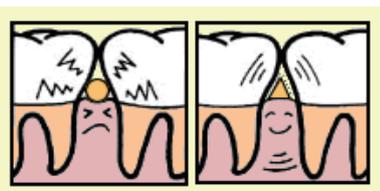

底辺が歯ぐきに優しくフィット、歯ぐき引き締め効果が期待できます。

使用方法

つながった三角ようじを1本ずつ折って使用します。歯間部の形状に合わせて、二等辺三角形の底辺が歯ぐき側にあたるように挿入します。無理な力で押し込まないようにしましょう。正しい方向で挿入したら、前後または上下に動かし、先端の1～2mmを使ってプラークを除去します。

使用上の注意

先端に付いたプラークはティッシュなどで拭き取りながら使いましょう。そのまま使い続けては、プラークを他の歯間に押し込んでしまうことになります。

デンタルピックは、ある程度の歯間空隙がある方にお使いいただくものです。歯間が歯間乳頭できちり満たされている部位は、デンタルピックを無理に使う必要はありませんが、つまようじをよく使う人はデンタルピックに切り替えることをお勧めします。

材質

材料はキシリトールの原料でもあるシラカバを使用しており、安心してお使いいただけます。

- サイズ：長さ50mm